

脫泡機(行星式離心攪拌機) PDM-300VN

最新標準以進行廣泛的應用

大容量進行各階段的混合及真空系統



廣泛的應用

- ✦ 脫泡機是於實驗室及小型量產的應用最理想之儀器，因其具有最高至 2 × 300 ml 的高容器容量。
- ✦ 適用於工業研究、工業發展、製藥業，及各種其他領域。
- ✦ 內含不同的設定條件以滿足對特殊產品的需求，例如：溫度、固體含量、烘乾、分離與混合之工作。

強效和強大的混合性能


- ✦ 使用行星式旋轉系統時，其強大效能的攪拌過程配上加強至 400G 高離心力，及個別可變速度達 1350 rev/min。
- ✦ 波函數使產品在攪拌循環過程中，以變量離心力達到混合的效果。

操作簡單、安全且毋需清洗

- ✦ 僅僅是混合容器也無須清理，減少溶劑和清潔用品，整體而言，節省了使用者的時間及成本，同時也適用於潔淨室的環境中。
- ✦ 其高容量的混合器十分輕巧，並裝有可固定式輪軸以利於移動
- ✦ 簡易且便利的構造，於密集的使用情況下也能快速的停機以節省使用者的時間
- ✦ 最健全的離心驅動系統，保持最高的安全標準，其中包含震動感測器、安全蓋開關偵測裝置及緊急停止按鈕

混合過程中真空


- ✦ 最短的時間內，產品可於混合的過程中達到真空的效果

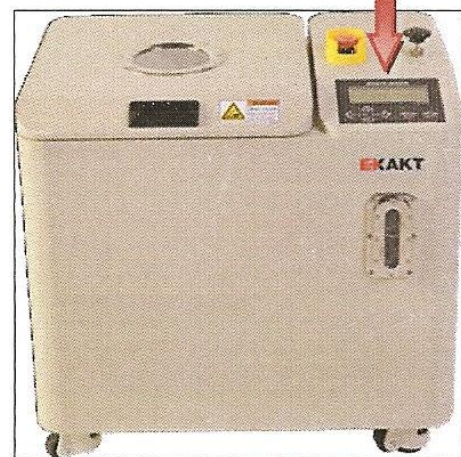

隆吉儀器有限公司

新竹縣新豐鄉新莊子瑞新村 2 鄰坎頭 35-3 號

TEL : (03)5680083.5680538 FAX : (03)5680209 E-mail : hdl03@yahoo.com.tw

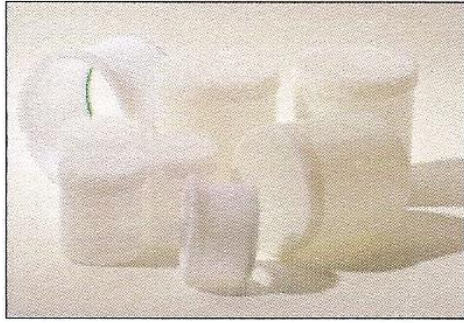

技術數據


- ✦ 脫泡機內二座容器可維持的容量為 0-300mlx2
- ✦ 可因使用者需求制定製具
- ✦ 兩個傳動馬達(total 2.0 KW)及真空泵，220 V
- ✦ 尺寸：680W × 660D × 440H mm
- ✦ 重量: 200Kg

真空系統

- ✦ 混合過程中之真空系統，其中包括真空泵、真空容器蓋，及安全閥(最高至 2.5 Torr)

控制面板具有以下功能

- ✦ 脫泡的轉速系統(順時鐘)，從 10 至 1350 rev/min
- ✦ 容器的轉速系統(逆時鐘)，從 10 至 1350 rev/min
- ✦ 真空度顯示
- ✦ 波函數：變調式轉速系統
- ✦ 程序功能的可選參數多達 10 組記憶
- ✦ 速度顯示

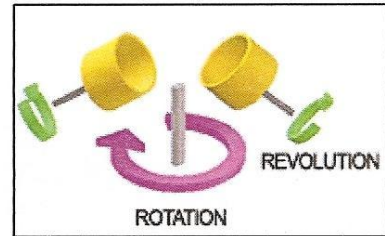

安全性

- ✦ 當其不平衡、震動、過載時，系統將安全地停止
- ✦ 安全蓋開關偵測裝置
- ✦ 可固定式輪軸確保穩固地操作

隆吉儀器有限公司

新竹縣新豐鄉新莊子瑞新村 2 鄰坎頭 35-3 號

TEL : (03)5680083.5680538 FAX : (03)5680209 E-mail : hdl03@yahoo.com.tw